

販売名：マイクロカテーテル 2
一般的名称：中心循環系マイクロカテーテル
医療機器承認番号：21700BZZ00471000

販売名：コネクタアタッチメント HL1
一般的名称：カテーテルコネクタ
届出番号：28B1X00004000019

Estream® 1.7S

マイクロ カテーテル 2
エストリーム® 1.7S

東レ・メディカル株式会社

[カテーテル特長]

- 最先端部をテーパ加工し1.7Frを実現、蛇行血管通過時の引っ掛かりを軽減しました。
- 親水性コーティングの耐久性を向上、安定した操作性を実現しました。

Estream[®] 1.7S

マイクロ カテーテル 2
エストリーム[®] 1.7S


[カテーテル先端テーパ部]



[コネクタアタッチメントHL1]



[カテーテル外観図]

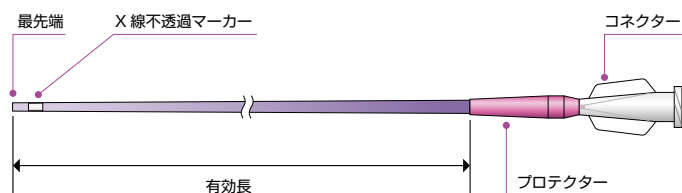

[規格・仕様]

カタログ番号	先端形状	カテーテル外径 最先端／先端／手元	有効長	最大適合GW径	適合親カテーテル 内径	コネクタ アタッチメントHL1	JANコード
EST105S3-ST-CA	ストレート	1.7Fr/1.9Fr/2.9Fr (0.58mm/0.63mm/0.97mm)	105cm	0.016inch (0.41mm)	0.97mm (0.042inch)	同梱あり	4560249951632
EST130S3-ST-CA			130cm				4560249951649
EST150S3-ST-CA			150cm				4560249951656
EST105S3-AG-CA	アングル		105cm				4560249951694
EST130S3-AG-CA			130cm				4560249951700
EST150S3-AG-CA			150cm				4560249951717

最大注入圧 8274kPa (1200psi) ※耐圧は開放圧です。また、高流量で造影剤を注入すると、血管損傷をきたす可能性があります。また、カテーテルがキック、捻じれている状態で、造影剤や薬剤は注入しないでください。

*予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。

販売元

東レ・メディカル株式会社

札幌 〒060-0031 北海道札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌泉第2ビル)
仙台 〒981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈1-5-3
東京 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル)
名古屋 〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173
大阪 〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル)
広島 〒730-0021 広島県広島市中区胡町4-21(朝日生命広島胡町ビル)
福岡 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-21(エフビル)

TEL(011)251-2233
TEL(022)772-5773
TEL(03)5835-2761
TEL(0568)21-5600
TEL(06)6253-7008
TEL(082)544-2761
TEL(092)477-3016


代理店

製造販売業者

株式会社ハイレックスコーポレーション

〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町1-12-28

[エストリーム[®] 1.7S フロー試験結果]

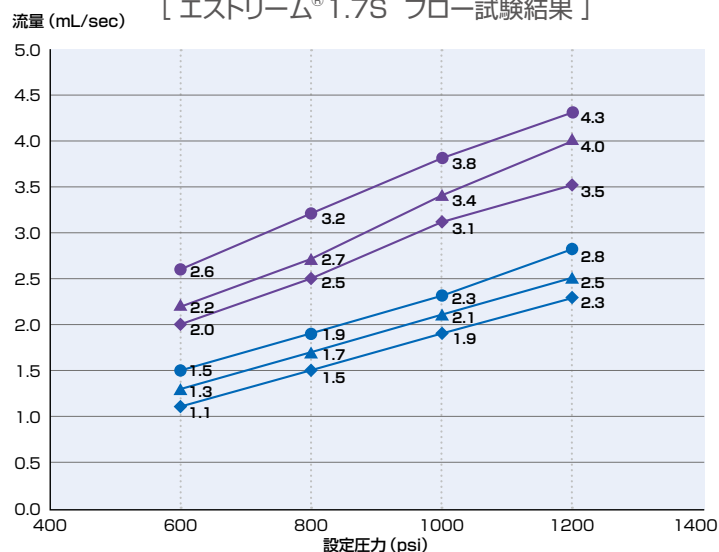

- エストリーム 1.7S 105cm(イオバミドール 300)
- ▲ エストリーム 1.7S 130cm(イオバミドール 300)
- ◆ エストリーム 1.7S 150cm(イオバミドール 300)
- エストリーム 1.7S 105cm(イオバミドール 370)
- ▲ エストリーム 1.7S 130cm(イオバミドール 370)
- ◆ エストリーム 1.7S 150cm(イオバミドール 370)

[社内試験]
インジェクター: Medrad Mark V
造影剤: イオバミドール 300, 370 (37℃)
造影剤注入圧: 600, 800, 1000, 1200psi
設定流量: 注入速度: 5mL/sec
(注入量: 20mL 時間: 4.0sec)
体外における試験データ(造影剤温度37℃)であり参考値です。製品の使用条件などにより値が変わる可能性があります。